

Écran tactile capacitif révolutionnaire



Sensibilité



Clarté



Facilité d'utilisation
Redéfinie



- **Sensibilité et clarté à portée de main**

Découvrez une nouvelle dimension d'interaction tactile grâce à notre technologie d'écran tactile capacitif. La haute résolution garantit que chaque détail est présenté de manière vivante, offrant une expérience de visionnement véritablement immersive qui ne laisse rien à l'imagination..

- **Maîtrise de l'interface intuitive**

Découvrez la puissance de l'affichage multi-formes d'onde comme jamais auparavant. La série N prend en charge la présentation simultanée de 8 à 12 formes d'onde, ce qui témoigne de ses capacités avancées. Au-delà de ses prouesses numériques, nos moniteurs offrent une gamme d'options d'interface pour répondre à divers besoins cliniques. De l'oxygène respiratoire aux interfaces d'analyse des tendances, en passant par les vues dédiées aux paramètres d'oxygène unique, la série N s'adapte sans effort à vos besoins.

- **Moniteur de la série N : le contrôle tactile redéfini**


Contrôle multi-gestes pour une interaction sans effort avec la série N. Faites glisser deux doigts pour naviguer en toute transparence entre les écrans, ce qui rend votre utilisation fluide et agréable. Et pour la sélection, une légère pression avec un doigt confirme votre choix. Avec le moniteur de la série N, la technologie est devenue plus conviviale que jamais.



Conçu avec des algorithmes cliniques de haute qualité

Améliorez vos soins aux patients et vos capacités de diagnostic. La série N – où chaque mesure témoigne de notre engagement envers des soins de santé précis et fiables.

- Découvrez la mesure de la SpO2 comme jamais auparavant avec notre série N. Grâce à la technologie SIQ, nos moniteurs fournissent un indicateur quantifiable de la mesure de la SpO2. Ce qui nous distingue, c'est notre algorithme à faible indice de perfusion, qui garantit un suivi précis de la SpO2 même dans des conditions de faible saturation.

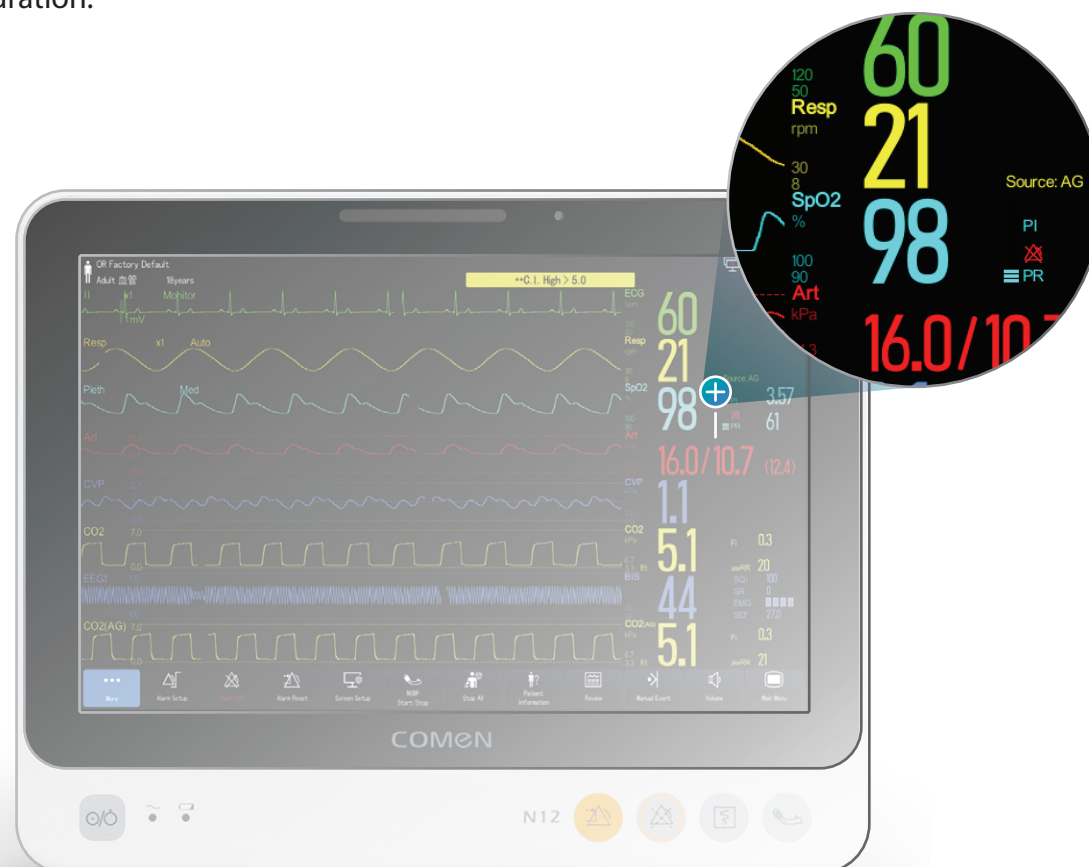

- La fonctionnalité ECG de la série N est un gage de polyvalence et d'innovation. Choisissez parmi les options de 3/5/6/12 dérivations, ce qui vous offre la flexibilité nécessaire pour personnaliser votre approche de surveillance. Avec la prise en charge de 27 types d'analyse d'arythmie, d'analyse ST, d'analyse QT, QTc, Δ QTc et d'analyse HRV, nos moniteurs vous permettent d'obtenir des informations complètes sur les performances cardiaques. La fonction de détection intelligente des dérivations garantit la stabilité des dérivations ECG, garantissant une surveillance cohérente et fiable.

Le nouvel algorithme NIBP fournit des résultats rapides sans compromettre la précision. La résistance améliorée aux interférences de mouvement en fait un choix privilégié, en particulier pour les mesures néonatales. Choisissez parmi les modes de mesure manuel, automatique (cyclique), séquentiel et continu, en vous adaptant aux besoins uniques de votre patient.



Transport d'urgence: le moniteur N10 est idéal pour les ambulances

Dans le domaine du transport médical d'urgence, l'efficacité et la fiabilité sont primordiales. Le moniteur N10 de Comen n'est pas seulement un moniteur de chevet exceptionnel, mais également une solution innovante conçue pour exceller dans les situations de transport en ambulance et de transport critique.

- Conception légère et robuste

Le moniteur N10 a été méticuleusement conçu en mettant l'accent sur la portabilité et la durabilité. Pesant à peine 3,65 kg, il offre une mobilité exceptionnelle sans compromettre les performances. Testé pour répondre aux normes d'ambulance EN1789, soumis à des tests de chute de 0,75 m et vérifié pour sa résistance à l'eau et à la poussière, le N10 est un compagnon robuste qui peut résister aux rigueurs du transport d'urgence.

- Chargement efficace pour des opérations ininterrompues

Reconnaissant la nature urgente des situations d'urgence, le moniteur N10 est équipé d'une interface de charge 12-28 V CC. Cette fonction permet une charge rapide et pratique lors de vos déplacements, garantissant que le moniteur est toujours prêt à l'emploi. La compatibilité de charge transparente améliore l'efficacité opérationnelle des équipes médicales d'urgence.

Stockage de données de qualité : optimiser les connaissances cliniques

Les moniteurs patient Comen série N introduisent un excellent stockage et une excellente analyse des données, améliorant la prise de décision clinique grâce à une prise en charge complète de la base de données.



Tendances tabulaires et graphiques jusqu'à 2400 heures

Suivez et analysez en toute transparence les tendances des données des patients grâce à une capacité de stockage étendue pouvant atteindre 2 400 heures. Visualisez les paramètres cruciaux sous forme de tableaux et de graphiques, permettant aux cliniciens de prendre des décisions éclairées en fonction des données historiques.



Révision segment ST 120 heures

Plongez dans la santé cardiaque avec l'analyse du segment ST couvrant une période de 120 heures. Cette fonctionnalité permet d'évaluer les changements ischémiques, facilitant ainsi les interventions opportunes si nécessaire.



Analyse ECG 12 dérivations 20 groupes

La série N prend en charge le stockage et l'analyse de jusqu'à 20 ensembles de données ECG à 12 dérivations, offrant des informations complètes sur les rythmes et les conditions cardiaques.



Mesure NIBP jusqu'à 3500 groupes

Capturez et conservez jusqu'à 3 500 ensembles de mesures de pression artérielle non invasives, contribuant ainsi à un aperçu complet de l'état cardiovasculaire d'un patient.



Examen des événements d'alarme 2500 événements

Les moniteurs de la série N conservent un enregistrement de 2 500 événements d'alarme, permettant une analyse rétrospective et un affinement des stratégies de gestion des alarmes pour une sécurité accrue des patients.



49 hours rappel ARR

Plongez dans le rappel des données d'arythmie, avec une durée de stockage des données de 48 heures. Cette fonctionnalité permet d'identifier et de comprendre les rythmes cardiaques irréguliers pour des interventions cliniques précises.



Examen complet de la forme d'onde 48 heures

La série N permet un examen complet de la forme d'onde sur 48 heures, facilitant une analyse approfondie de la forme d'onde et une évaluation rétrospective.



OxyCRG 400 événements

Analysez jusqu'à 400 événements OxyCRG pour une meilleure compréhension de l'oxygénation des patients et des tendances cardiorespiratoires.

