

COMEN

DISTRIBUÉ PAR

BPM 
Boutique Pro Médical


C30 COMEN

Moniteur multi-paramètres d'urgence



LE C30 EST :

- 5en 1 avec la surveillance de 5 paramètres vitaux.
- Intuitif grâce à son écran tactile en couleur.
- Parfaitement transportable avec sa poignée, son poids plume et son design compact.

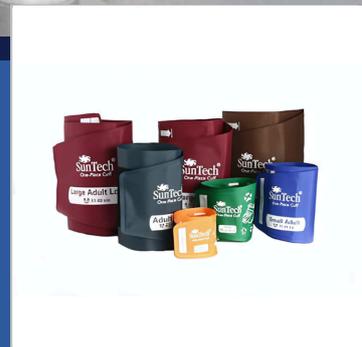

CE
1639
Classe IIa

www.boutiquepromedical.com

C30 COMEN

Moniteur multi-paramètres d'urgence

DISTRIBUÉ PAR

BPM 
Boutique Pro Médical

Le moniteur multi-paramètres est dédié au premier secours pour une surveillance sur place ou dans les véhicules d'urgence. Il mesure la pression artérielle non invasive (PNI), la saturation en oxygène (SpO2), la fréquence respiratoire (RESP), la capnographie en CO2 (EtCO2), la température corporelle et dispose d'un ECG 3 ou 12 dérivations.

Proposé en deux configurations :

- PNI + SpO2 + RESP + prise EtCO2 + 2 prises de sonde de température + ECG 3 dérivations
- PNI + SpO2 + RESP + prise EtCO2 + 2 prises de sonde de température + ECG 12 dérivations



LE C30 EST PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ POUR LES SERVICES D'URGENCE EXTRA-HÔPITALIERS, OFFRANT :

UNE GRANDE TRANSPORTABILITÉ

Le moniteur est très compact, petit et léger (1,5kg). Que ce soit avec sa poignée démontable qui permet une prise en main rapide ou avec son sac de transport étanche et anti-choc, le C30 assure une longue autonomie de surveillance, disposant d'un kit d'alimentation véhicule (12V) et d'un kit de batterie de transport(7200mAh).

UNE UTILISATION INTUITIVE ET SIMPLIFIÉE

Son écran retro-éclairé 4,3" tactile propose une interface multifonction, avec des touches « raccourcis » pour accéder rapidement aux différents modules de mesure et une interface graphique en couleur pour une lisibilité parfaite des courbes ECG.



C30 COMEN

Moniteur multi-paramètres d'urgence

DISTRIBUÉ PAR


BPM 
Boutique Pro Médical

RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU C30 :

- **PARAMÈTRES :** PNI, SpO2, ECG, Respiration, 2 canaux de température (sondes à rajouter) EtCO2 (capteur à rajouter).
- **ECRAN** tactile 4,3" avec retro-éclairage.
- **DOUBLE ALARME :** sonore (réglable) et visuelle à 3 niveaux avec système d'alarme intelligent à 3 couleurs (bleue, jaune, rouge).
- **PNI :** adapté à tous types de patients (adulte, enfant et nouveau-né).
- **STOCKAGE :** 48 heures de stockage de données et d'analyse des tendances.
- **BATTERIE :** lithium intégrée de 2200mAh (autonomie de 4 heures).
- **OPTIONS :** sac de transport en option avec kit de batterie de transport (7200mAh).
- **ALIMENTATION :** kit d'alimentation (12V) au véhicule de secours en option.
- **SYSTÈME D'EXPLOITATION :** Linux.
- **DIMENSION :** 19,0 x 8,2 x 10,5cm
- **POIDS :** 1,5kg
- **GARANTIE :** 3 ans

CONTENU DU PACK :

- Le moniteur (boîtier)
- Un câble ECG réutilisable 3 dérivations - connecteur à pince (Protection défibrillation/IEC) C30
- 1 paquet de 12 électrodes (adulte) • Un brassard adulte 25-35 cm • Un capteur SpO₂ adulte réutilisable
- Une rallonge de 2 m pour brassard
- Un câble secteur
- Un manuel d'utilisation

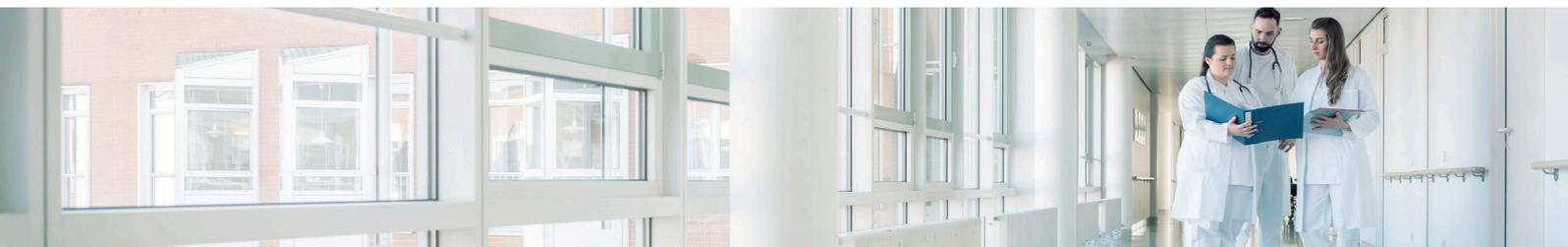

C30 un moniteur de **COMEN**

Dispositif Médical de classe IIb - CE 1639 Conforme à la directive 93/42/EEC relative aux dispositifs médicaux
Fabriqué par Shenzhen Comen Medical Instruments Co, Ltd - Distribué par Holtex

Boutique Pro Médical
24A rue de la Sublainerie
37510 Ballan Miré

www.boutiquepromedical.com



Contact : **02 46 46 90 39 -**

contact@boutiquepromedical.com